

Kryotherapie gegen Stielwarzen

Zeigen Sie Stielwarzen die kalte Schulter – mit Wortie® spezial

Alles schien perfekt: Die exklusiven Karten für die Theaterpremiere, die elegante Hochsteckfrisur, das neue Abendkleid... Dann, bei einem letzten Blick in den Spiegel, sah ich diese kleine Hautwucherung an meinem Hals. Die hatte ich schon vor längerer Zeit entdeckt, aber jetzt mit dem neuen Kleid, das ungewohnt viel Haut zeigt, störte sie mich doch gewaltig.

Harmlos aber unschön

„Das ist doch nur eine kleine Stielwarze“, erklärte mir mein Mann. „Viele Menschen haben Stielwarzen. Das ist nicht schlimm!“ Trotzdem fühlte ich mich den restlichen Abend unwohl und konnte die Stielwarze nicht vergessen.

Ein paar Tage später berichtete ich meiner Schwester von meinem kleinen Problem. „Dein Hausarzt kann die Stielwarze mit einem Skalpell weg-schneiden. Oder du gehst zum Dermatologen und lässt sie vereisen. Dann sitzt du aber den halben Vormittag im Wartezimmer wegen so einer Kleinigkeit“, sagte sie. „Aber das muss gar nicht sein. Ich habe meine Stielwarzen einfach selbst entfernt – bequem zu Hause mit **Wortie® spezial**.“

„**Wortie® spezial**?“, fragte ich.

„Ja, das gibt es jetzt in der Apotheke.“

Das funktioniert wie die Warzenvereisung beim Hautarzt und die Behandlung tut fast gar nicht weh.“

Einfache Behandlung zu Hause

Gleich nach unserem Treffen ging ich in die Apotheke und besorgte mir **Wortie® spezial**. Der Apotheker zeigte



mir, wie einfach die Anwendung ist: Man muss nur einen der beiliegenden Fixierungsringe zur Stabilisierung um die Stielwarzen kleben, den Präzisions-

applikator aktivieren und ihn 40 Sekunden lang auf die Stielwarze halten. 10 bis 14 Tage später fällt diese dann einfach ab und die gesunde, glatte Haut wird sichtbar. Zwei Wochen später war ich mein kosmetisches Problem los. Rechtzeitig zur Hochzeit von Freunden und für den nächsten Einsatz meines neuen Abendkleides. Diesmal fühlte ich mich rund um wohl!

Mehr Infos finden Sie unter

www.wortie-hennig.de




Wissenswertes über Stielwarzen

Stielwarzen sind harmlose und gutartige Hautwucherungen, die überall am Körper auftreten können, am häufigsten jedoch am Hals und im Bereich der Achselhöhle. Stielwarzen werden nicht durch Viren verursacht und sind nicht ansteckend. Bei ihrer Entstehung spielt wohl eher eine erbliche Veranlagung eine Rolle. Knapp die Hälfte der Deutschen leidet unter Stielwarzen. Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen. Im Alter, bei Diabetes oder Übergewicht und während der Schwangerschaft steigt die Wahrscheinlichkeit, Stielwarzen zu bekommen.

So erkennen Sie Stielwarzen

Eine typische Stielwarze ist hautfarben oder nur ein wenig dunkler, weich, schmerzfrei bei Berührungen, kann leicht hin und her bewegt werden und ragt auf einem kleinen, schmalen Stiel aus der Haut. Wenn eine Hautwucherung alle diese Eigenschaften vorweist, handelt es sich um eine Stielwarze, die Sie ganz einfach selbst zu Hause mit **Wortie® spezial** behandeln können.

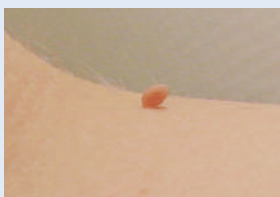

Typische Stielwarzen

